



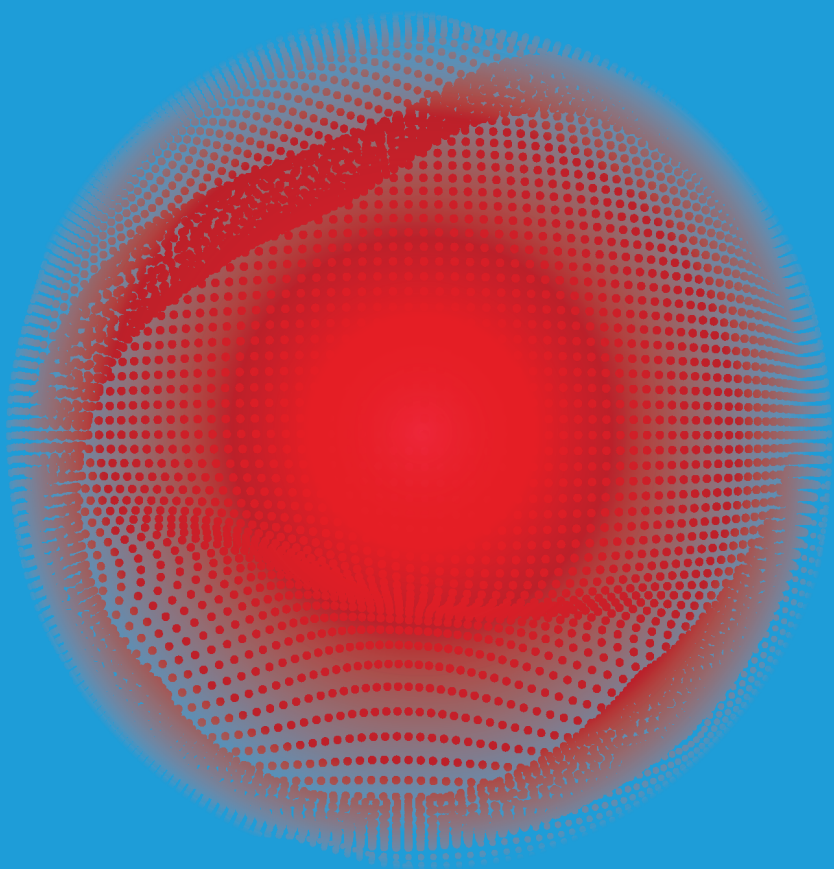


Flaminal[®]


Wundversorgung
in einer neuen Dimension

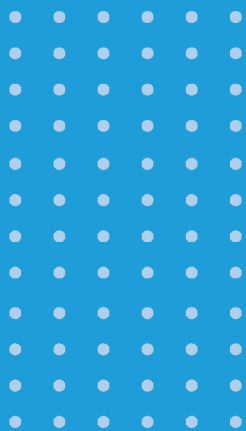


Vermeidet den Bedarf einer Vielzahl von Produkten

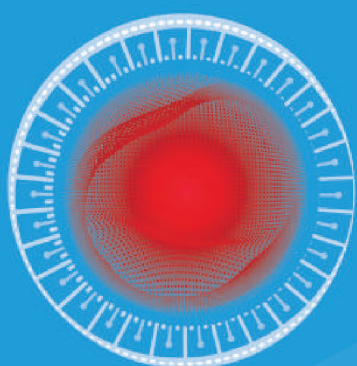

Antimikrobiell

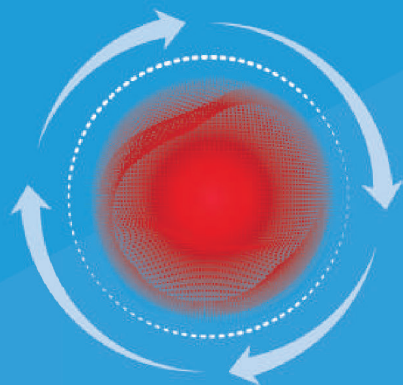

Vielseitig

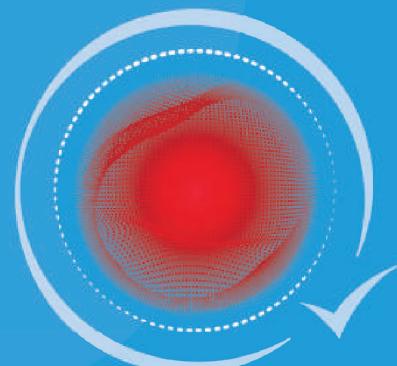

Einfache Anwendung

Flaminal® Hydro und Flaminal® Forte sind einzigartige primäre Wundauflagen, die als Enzym Alginiol Verbände bezeichnet werden.

Sie enthalten ein antimikrobielles Enzymsystem, das in hydratisierte Alginat eingebettet ist. Sie können für die Behandlung von akuten und chronischen Wunden und Wunden mit Infektionsrisiko eingesetzt werden.



Antimikrobielles Enzymsystem



Absorbierendes Alginat




Kontinuierliche Wundreinigung

Flaminal® bietet antimikrobiellen Schutz und reduziert die aus dem Biofilm freigesetzte Bakterien^{1,2}

Flaminal® nimmt überschüssiges Exsudat auf³

Flaminal® sorgt für ein andauerndes Debridement der Wunde³

Ein einzigartiges antimikrobielles Enzymsystem^{1,2}

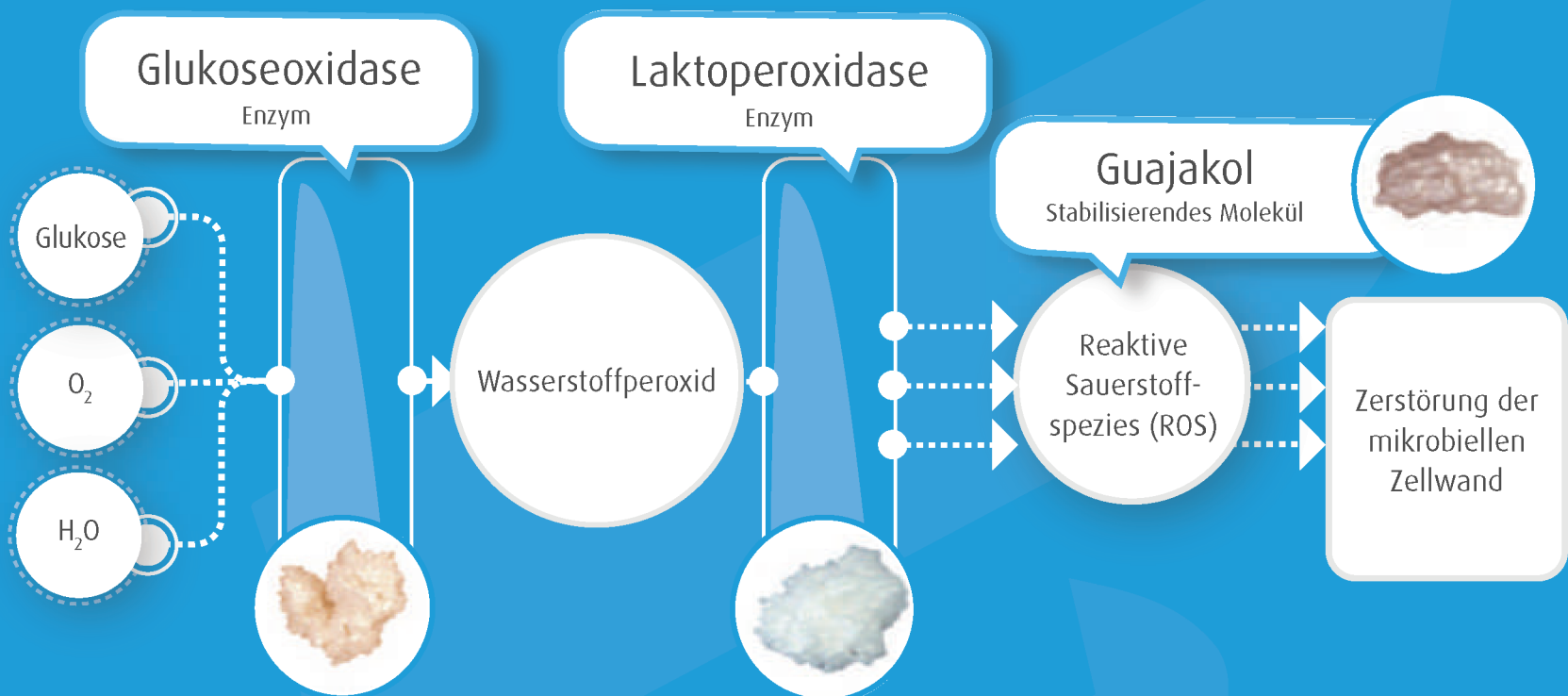


Schützt vor Infektionen^{1,2}

- Reduziert die aus dem Biofilm freigesetzten Bakterien^{1,2}
- Tötet ein breites Spektrum von Bakterien innerhalb von 6 Stunden ab¹
- Bislang keine Resistenz bekannt^{1,6}
- Sicher für Haut und Wundgewebe²




Grampositive Bakterien

Staphylococcus aureus (MRSA)
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis

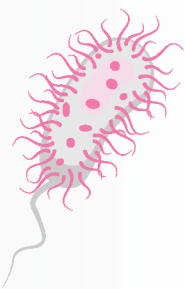


Gramnegative Bakterien

Escherichia coli,
Klebsiella oxytoca,
Enterobacter cloacae,
Enterobacter aerogenes, *Burkholderia*
multivorans,
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas maltophilia
Pandoraea apista
Achromobacter denitrificans

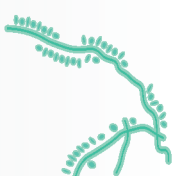


Pilze

Candida albicans

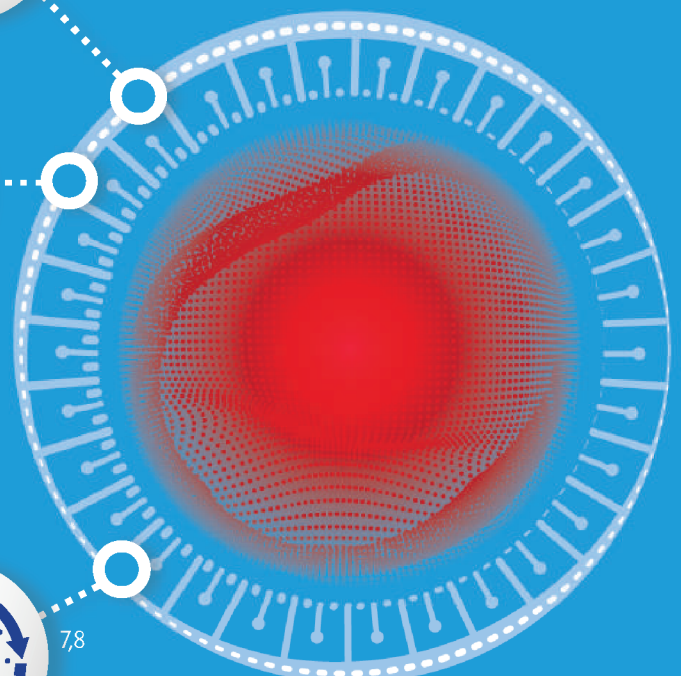

7,8

Schnelle und einfache Anwendung in 3 Schritten

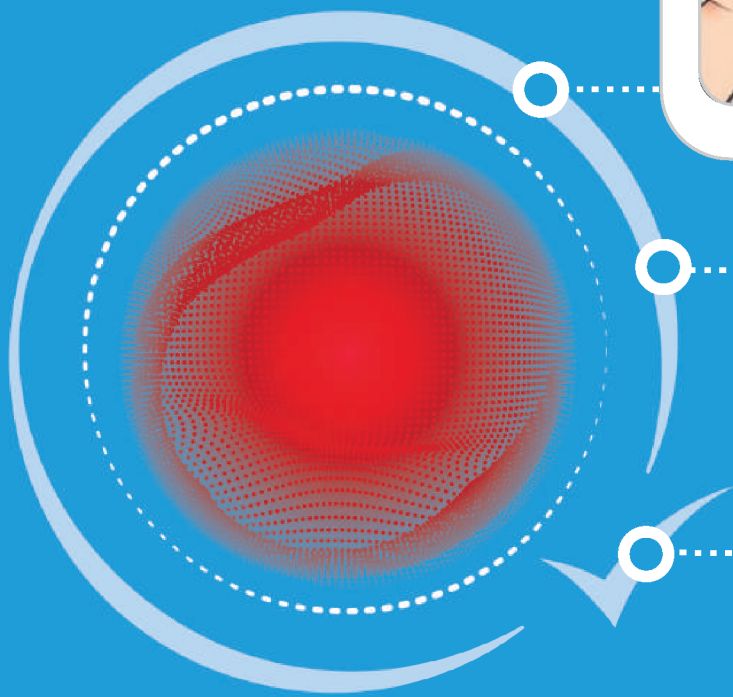


1. Reinigen und auswählen

Die Wunde gemäß dem lokalen Protokoll reinigen und je nach Menge des Wundexsudats die geeignete Version von Flaminal® auswählen.



2. Auftragen

Das gesamte Wundbett mit einer ausreichend dicken Schicht (min. 0,5 cm) Flaminal bedecken.

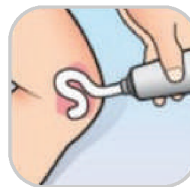

3. Abdecken


Abhängig von der Exsudatmenge die Wunde mit einer sekundären Wundauflage nach Wahl abdecken.

Verbandwechsel


- Leichte Exsudation: Alle 3-4 Tage
- Mäßige Exsudation: Alle 2-3 Tage
- Starke Exsudation: Alle 1-2 Tage
- Passt sich dem Wundbett an. Zur Anpassung an Form und Größe der Wunde ist kein Zuschneiden erforderlich.



Für alle Stadien im Wundinfektionskontinuum

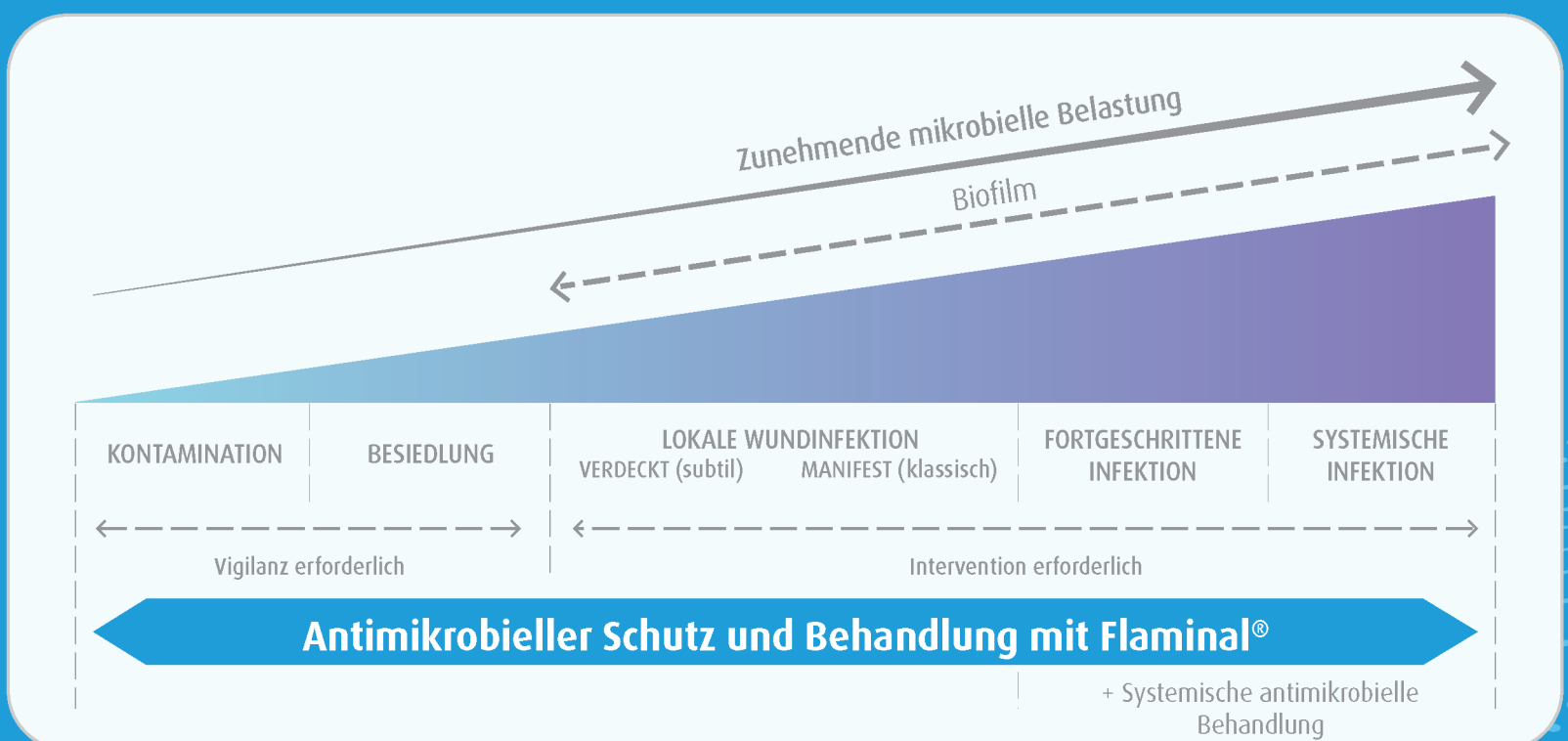

Die Anforderungen der Wundheilung vereint in einer Lösung

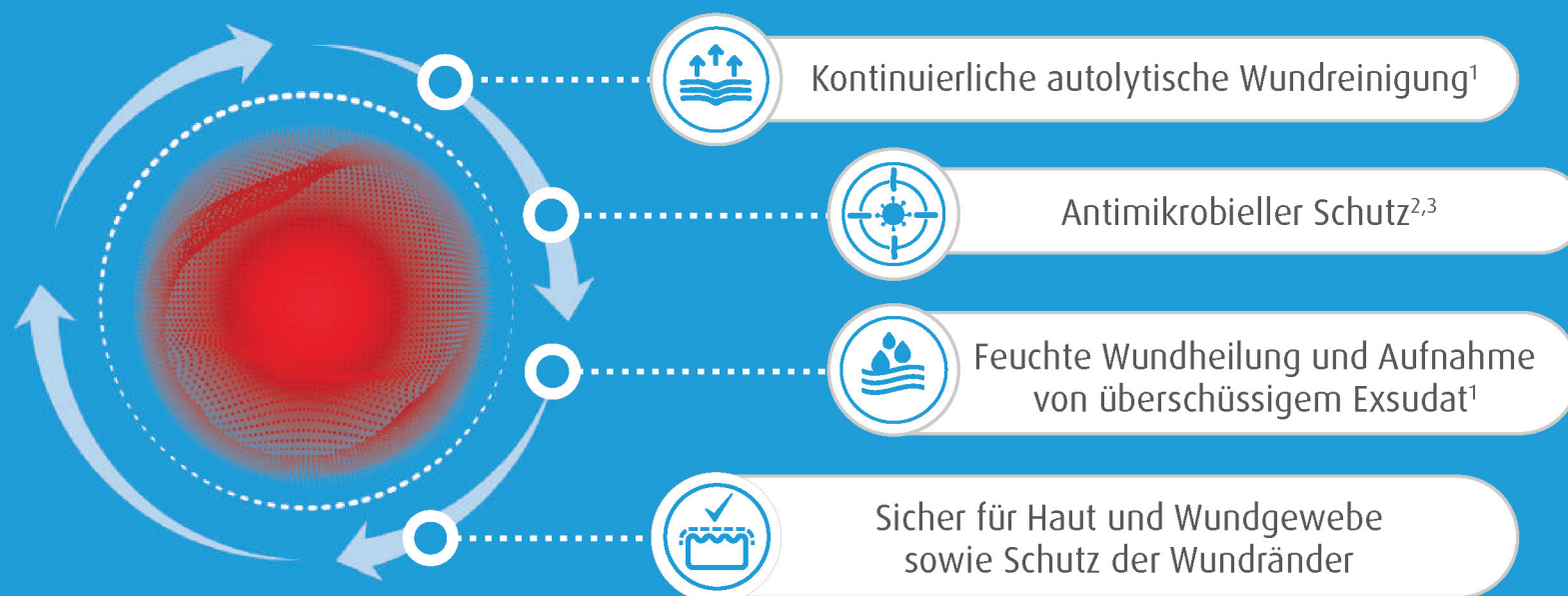

Für unterschiedliche Wundtypen, -zustände und -phasen geeignet^{3,4,5}

	Entzündungsphase		Proliferative Phase	Epithelisierungsphase
Eigenschaften der Wunde	• Schürfwunden • Freiliegende empfindliche Strukturen (z.B. Sehnen o. Knochen) • Wunden mit geringer Exsudation	• Wunden mit Infektionsrisiko oder infizierte Wunden* • Oberflächliche Wunden und unterminierte oder tiefe Wunden	• Feuchte oberflächliche Wunden und Hohlräume	• Geringe Exsudation • Epithelisierende Wunden
Exsudatmenge	Gering bis mäßig	Mäßig bis stark	Mäßig	Gering bis mäßig
Zielsetzung	• Debridement • Feuchte Wundheilung	• Reduziert Keimbelastung • Debridement • Exsudatmanagement • Schutz der Wundränder	• Feuchte Wundheilung • Exsudatmanagement • Schutz	• Schutz
Primäre Wundauflage	 Flaminal® Hydro	 Flaminal® Forte	 Flaminal® Hydro oder Flaminal® Forte	 Flaminal® Hydro
Sekundäre Wundauflage	Je nach Exsudatmenge	Je nach Exsudatmenge	Je nach Exsudatmenge	Je nach Exsudatmenge



Oberflächliche und tiefe partielle Verbrennungen



Diabetisches Fußsyndrom



Dekubitus



Tiefe oder unterminierte Wunden



Onkologische Wunden



Operationswunden



Ulkus Cruris



Hauteinrisse



Traumatische Wunden

Als formstabiler Alginatverband mit einem antimikrobiellen Enzymsystem entspricht Flaminal® einem Verbandmittel mit ergänzenden Eigenschaften im Sinne der Arzneimittel-Richtlinie⁹.

Der antimikrobielle Schutz findet ausschließlich in der stabilen Struktur von Flaminal® statt und hat keine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung. Die patentierte Zusammensetzung garantiert eine kontinuierliche Abdeckung der Wunde.

Während des gesamten Behandlungsverlaufs ist ein ideal feuchtes Wundheilungsmilieu gewährleistet.



Flaminal® Hydro

Für leicht bis mäßig
exsudierende Wunden



Flaminal® Forte

Für mäßig bis stark
exsudierende Wunden



Kontaktieren Sie uns unter info@flenhealth.de.

CE 0344
FlaminalPZN241_V2

- Cooper RA (2013) Inhibition of biofilms by glucose oxidase, lactoperoxidase and gualacol: the active antibacterial component in an enzyme alginogel®. Int Wound J 10(6): 630-7.
- De Smet, K. et al. Pre-clinical evaluation of a new antimicrobial enzyme for the control of wound bioburden. Wounds. 2009, 21(3): 65-73.
- Flenhealth.co.uk. 2021. Instruction For Use.
- Beele, H. et al. Expert consensus on a new enzyme alginogel. Wounds International. 2012, 3(2): 42-50.
- Durante, C. An open-label, non-comparative case series on the efficacy of an enzyme alginogel. J Wound Care 2012, 21(1), 22 – 28.
- Gotttrup, F. et al. EWMA document: antimicrobials and nonhealing wounds – Evidence, controversies and suggestions. J Wound Care. 2013, 22 (5 suppl): S1-S92.
- Flen Health. Data on File. Internal Report: Evaluation of Fluid Absorption Capacity and Antimicrobial Activity of Aquacel products. 2017. Flen Health. Data on File.
- Internal Report: Evaluation of Fluid Absorption, Antimicrobial Activity and adherence to the wound bed of Cutimed sorbact. 2017.
- G-BA 20.08.2020: Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL); Abschnitt P und Anlage Va - Verbandmittel und sonstige Produkte zur Wundbehandlung; S. 7.
- * Flaminal® darf bei infizierten Wunden nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden.